



reddot award 2014
winner



De kleurrijke weg naar comfortabel en veilig rijden

De nieuwe *Invacare Colibri* is een stijlvolle, simpele en kleurrijke micro lichtgewicht scootmobiel, ontworpen voor hen die een compleet onafhankelijke leefstijl hebben. Dankzij het unieke *Invacare LiteLock™* systeem kan de scooter gemakkelijk, zonder gereedschap, uit elkaar worden gehaald en past daarmee eenvoudig in iedere kofferbak. Met zijn kleine omvang is de *Invacare Colibri* uitzonderlijk wendbaar in smalle of beperkte ruimtes. Dat is waarom de *Invacare Colibri* u overall brengt, waar u maar wilt! U heeft de keuze uit een reeks trendy, verwisselbare accentkleuren om uw unieke ontwerp te realiseren. Wees klaar om comfortabel en veilig te rijden in deze nieuwe, stijlvolle metgezel.

Trusted Solutions, Passionate People



Yes, you can.®



LiteLock systeem - eenvoudig in- en uit elkaar te halen.

Het ingenieuze en unieke *Invacare LiteLock™* systeem ontgrendelt automatisch wanneer de accu eruit wordt gehaald. Het duurt minder dan een minuut om de scooter uit elkaar te halen - zonder gereedschap. De voorkant kan simpelweg worden opgetild en los in de kofferbak worden gelegd, samen met de andere componenten. Later is het in elkaar zetten net zo eenvoudig!

Mix en match panelen - eenvoudig te verwisselen en duurzaam

De *Invacare Colibri* is ontworpen naar de nieuwste trends. Naast een stijlvol ontwerp en dito zitting kunt u naar keuze de kleurpanelen verwisselen. Hiervoor is geen gereedschap nodig, want het clip-on mechanisme is snel en eenvoudig en garandeert dat alles goed op z'n plek blijft.

Eigenschappen en opties



Demontage zonder moeite

Niet denken - maar doen! Minder dan een minuut is alles wat u nodig heeft om de **Colibri** uit elkaar te halen voor transport.



Set grotere wielen en accu (optie)








Perfect om grotere afstanden mee af te leggen en op ongelijk terrein te rijden. Kies waar u de accu wilt opladen: direct op de **Colibri** of los ervan.



Meer comfort

De zachte, gepolsterde zitting geeft comfort tijdens het rijden. Voor nog meer comfort is er ook een 'easy fit' zittingvering verkrijgbaar.

Technische gegevens

				
Invacare Colibri 465 mm	400 mm	370 - 420 mm	385 mm	505 mm
				
4 wielen 1010 mm	44 kg (12 Ah) 49 kg (18 Ah)	136 kg	2 x 12 Ah 2 x 18 Ah	2200 mm
3 wielen 1010 mm	42 kg (12 Ah) 46 kg (18 Ah)	136 kg	2 x 12 Ah 2 x 18 Ah	1940 mm
				
Invacare Colibri 45 mm	6° / 10,5%	200 W	Tot 16 km ²	8 km/u



LiteLock™ system

(patent pending)

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3 - 6716 AE Ede
Nederland
Tel.: +31 (0) 318 - 695757
Fax +31 (0) 318 - 695758
Email: nederland@invacare.com
www.invacare.nl

© 2016 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voor aankondiging.

Colibri - NL - 06/2016

Accentkleuren




Sapphire Blue



Jasper Red



Jade Green

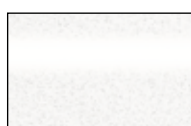

Marble White



Diamond Silver