



Invacare®

ORION METRO

De perfecte mix van comfort,
veiligheid en betrouwbaarheid



Of u nu geniet van een snelle trip naar vrienden om te eten of van een kort uitstapje naar de winkels, met de **Orion Metro** komt u overal.

De nieuwe, ergonomisch ontworpen **Orion METRO** is volledig samengesteld met eigenschappen voor zowel startende als doorgewinterde scootmobiel gebruikers. Uitgerust met talrijke functies voor een veilige, gemakkelijke en plezierige rit.

De **Orion METRO** is de perfecte mix van comfort, veiligheid en betrouwbaarheid!



Gecontroleerd en veilig

Het veersysteem op de compacte **Orion METRO** is ontworpen om verschillende dagelijkse rijomstandigheden ontspannen en gecontroleerd aan te kunnen zodat u kunt genieten van de rit. De krachtige motor, in combinatie met 11" luchtbanden, neemt u soepel en veilig mee over obstakels of oneffen terrein.

Veiligheid als standaard

Naast een uniek verlichtingssysteem, is de **Orion METRO** uitgerust met een elektronische snelheidsreductie welke in bochten de snelheid automatisch vermindert. Dit zorgt voor veilige, comfortabele manoeuvres op ieder moment. Daarnaast voorkomt de twee-staps motorontkoppelingshendel onbedoeld wegvallen van de aandrijving. Deze kenmerken, gecombineerd met uitgebreide onafhankelijke laboratoriumtesten van de Duitse TÜV, maken dat veiligheid voorop staat bij de Invacare **Orion METRO**.



Eenvoud en onderhoudsgemak

Door gebruik te maken van een groot aantal hoogwaardige componenten hebben wij een betrouwbare **Orion METRO** gemaakt die eenvoudig te onderhouden is. Door de cover te verwijderen krijgt u direct toegang tot de accu's, de elektronica, motor en kabels. De vitale delen zoals de elektronica en de motor worden beschermd tegen corrosie en water om te voorkomen dat vuil onnodige storingen veroorzaakt.





3-wiel Orion METRO



4-wiel Orion METRO



Instelbare stuurkolom

Gebruikers passen de stand van de stuurkolom eenvoudig aan om de ideale positie te vinden.



Ergonomisch stuur

Nieuw vormgegeven ergonomisch stuur voor een comfortabele en ontspannen rit.



Handrem

Zorgt voor onmiddellijk afremmen indien noodzakelijk.



Remlicht

Duidelijke, heldere remverlichting waarschuwt achterliggers dat de scooter vertraagt.




Motorontkoppelingshendel

De twee-staps motorontkoppelingshendel voorkomt onbedoeld wegvallen van de aandrijving.



Auto-snelheidsreductie

De automatische reductie van de snelheid in bochten zorgt voor extra veiligheid.

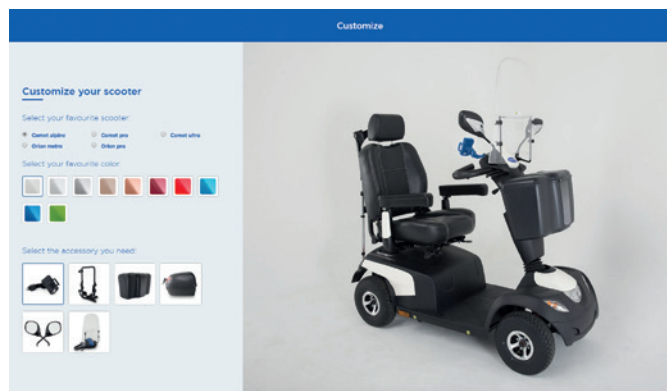












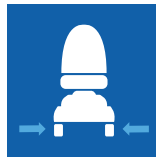


Maak uw scootmobiel persoonlijk




Kies uit 10 verschillende uitwisselbare kleurpanelen en meer dan 25 accessoires voor het aanpassen van uw scooter aan uw individuele stijl. Voor meer informatie, bezoek onze website op: www.invacare.nl.

Technische gegevens

Raadpleeg de Invacare website voor meer informatie over dit product.


	Breedte rugleuning	Zitdiepte	Zithoogte	Rughoogte	Totale breedte	Totale lengte	Ledig gewicht
3-wiel	 510 mm	 Deluxe: 470 mm	 Min. 440 mm Max. 510 mm	 Deluxe: 490 mm	 660 mm	 1240 mm	 103 kg
4-wiel	510 mm	Comfort en Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm	660 mm	1270 mm	110 kg

	Gewicht zwaarste deel	Max. gebruikersgewicht	Accu capaciteit	Draaicirkel	Max. drempelhoogte	Bodemvrijheid	Max. veilige helling
3-wiel	 52 kg	 136 kg	 2 x 12 V/50 Ah (C20) AGM	 2250 mm	 80 mm	 78 mm	 10°
4-wiel	57 kg	136 kg	2 x 12 V/50 Ah (C20) AGM	2600 mm	80 mm	78 mm	10°


	Actieradius	Max. rijsnelheid	Vermogen
3-wiel	 54 km	 12 km/u	 240 W / 600 W ¹
4-wiel	54 km	12 km/u	240 W / 600 W ¹

1. Piekvermogen

Beschikbare kleuren

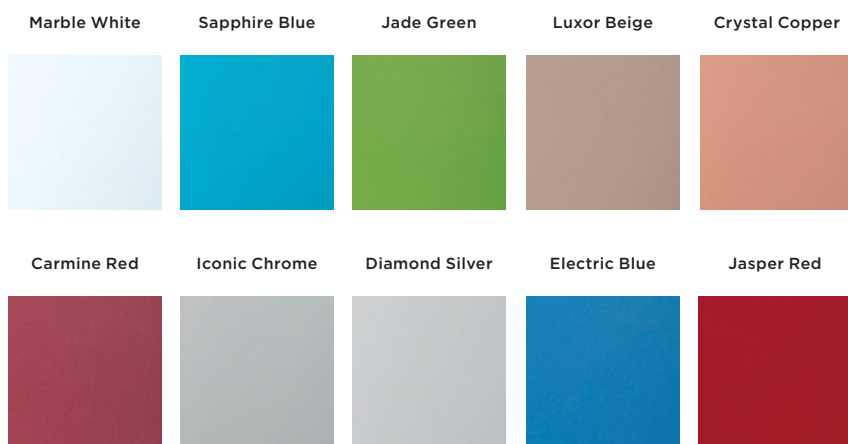

Bekleding

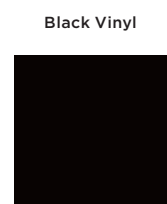

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
 Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
 nederland@invacare.com
 www.invacare.nl

Invacare B.V.
 Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
 Nederland

Trusted Solutions,
 Passionate People

